


HANSUN™ 韩尚®
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ

Массажная накидка

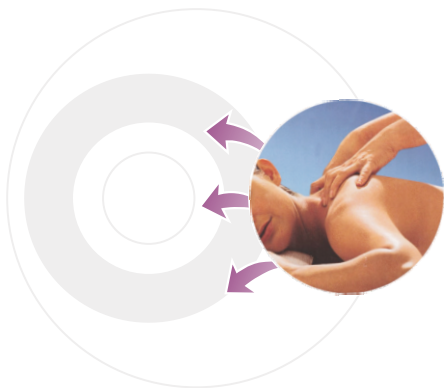

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.
Пожалуйста прочитайте руководство
пользователя перед началом эксплуатации.
Это руководство содержит правильные методы
использования, очистки, обслуживания, а также
требования по мерам безопасности.
Пожалуйста, сохраняйте данное руководство для
обращения к нему в будущем.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Массажная накидка осуществляет разминающий массаж шеи, спины, поясницы и бедер для снятия мышечного напряжения и улучшения кровообращения. Двойные встроенные вибрационные двигатели в области сиденья воздействуют на бедра, чтобы расслабить тело и усилить обмен веществ. В основе уникального воздействия массажного механизма вверх-вниз лежит теория соматологии. Этот продукт был разработан для имитации массажа человеческих рук, передавая разминающее и вибрационное воздействие на большую область вашего тела с помощью специальных массажных головок. Оно воспроизводит органическое сочетание разминающего и вибрационного воздействия. Четыре пары разминающих головок могут выполнять разминающий и раскатывающий массаж, перемещаясь при этом вверх и вниз вдоль вашего тела. Есть три варианта фокусировки массажа: вся спина, поясница или массаж верхней части спины, подходящий для использования в офисе, дома и в автомобиле.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ



Массажные ролики
для шеи и плеч

Массажные ролики
для спины



Адаптер питания



Адаптер питания
от прикуривателя

Вибрационный массаж
для ягодиц



Офисное
кресло



Софа

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Отдельный узел для шеи делает массаж более комфортным.
- Массаж шеи регулируется по высоте.
- Разминающие ролики спины настраиваются на любую зону.
- Глубокий массаж Шиацу для шеи и спины.
- 3 зоны массажа спины: полная, верхняя и нижняя часть.
- Нагрев помогает улучшить циркуляцию.
- Ручной пульт позволяет настроить ваш массаж.
- Может использоваться в автомобиле и дома.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Для начала массажа, вставьте вилку питания в розетку.
2. Укрепите задний ремешок на своем стуле.
3. Расположитесь в удобном положении.
4. Нажмите кнопку питания, для включения массажера.
5. Нажмите и удерживайте кнопку «вверх» или «вниз», для регулировки высоты массажа шеи. Ролики шеи будут подниматься или опускаться до тех пор, пока не достигнут максимального значения. После того, как вы достигните требуемой позиции, отпустите кнопки.



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Данная массажная накидка предназначена для домашнего использования. Пожалуйста при использовании массажера соблюдайте следующие меры предосторожности:

1. Избегайте применения массажера вблизи открытого огня или в помещениях с повышенной влажностью.
2. Если у вас есть какие-либо заболевания или вы проходите курс лечения, перед применением массажера пожалуйста проконсультируйтесь с врачом.
3. Если вы беременны, недавно перенесли хирургическую операцию или имеете какое-либо серьезное заболевание, в том числе эпилепсию, гемофилию, диабет, рак, гипертонию, расстройство нервной системы, нервно-мышечное расстройство или другое, вам не рекомендуется пользоваться данным массажером, без консультации с вашим лечащим врачом.
4. Не используйте массажер в сонном состоянии или во время сна.
5. Не открывайте корпус массажера и не пытайтесь его ремонтировать.
6. Не используйте массажер под подушкой или одеялом, во избежание чрезмерного перегрева или возгорания.
7. Избегайте контакта массажера с острыми предметами.
8. Не используйте массажер на открытом воздухе и вне помещения.
9. Избегайте использования массажера детьми без присмотра взрослых.
10. Держите этот массажер в недоступном для детей месте.
Не подключайте его к другому источнику питания. Не используйте массажер одновременно с другим электрическим оборудованием (например, с электрическим устройством стимуляции мышц).
Не используйте массажер во время вождения автомобиля. Для прекращения использования массажера, переведите переключатель в положение «ВЫКЛ» и отключите его электропитание.
11. Используйте только оригинальные аксессуары и адаптер питания.
12. Не держите сетевой кабель вблизи нагревательных приборов.
13. Этот массажер не является медицинским оборудованием.
14. Массажер имеет нагревающиеся поверхности. Те, кто нечувствителен к нагреву, должны обратить на это особое внимание.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип: Массажная накидка

Модель: HS8009

Напряжение питания: AC 100-240 В / 50 - 60 Гц

Вых. напр.: DC 12 В

Макс. ток: 4 А

Мощность: 48 Вт

Таймер: 15 минут

HANSUN™ 韩尚®
ЭКСПЕРТ ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ