



ПОРТАТИВНЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ

BM 2523 / 60 см

RELAX DELUX

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



ВВЕДЕНИЕ

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией. При правильном пользовании и обслуживании, массажный стол прослужит в течении длительного времени.

В комплект входит:


Массажный стол 1 шт. / Отверстие для лица 1 шт. / Подушка для лица 1 шт.

Рама для лица 1 шт. / Полка для рук 1 шт. / Подлокотник 2 шт.

Сумка-чехол 1 шт. / Инструкция 1 шт.

Модель	BM2523-1.2.3
Наименование	Складной массажный стол с деревянным основанием
Размер	185*60*(60-80) см (регулировка высоты)
Грузоподъемность	Менее 270 кг


Складывание/раскладывание

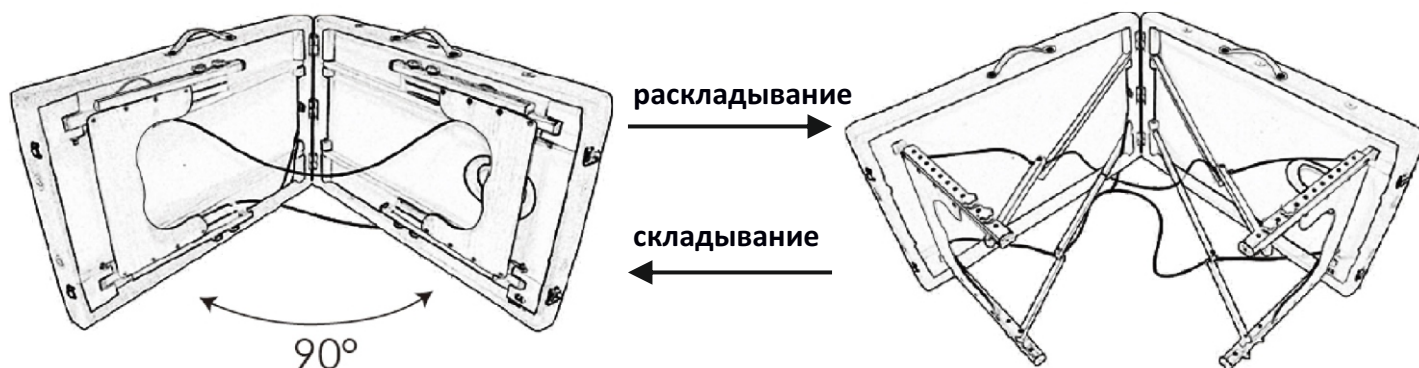

Этапы сборки:

1. Чтобы разложить стол, расположите его на ровной поверхности боковой стороной вниз. Разложите стол медленно, пока он не откроется на 90 градусов. Затем разложите деревянные части.
2. Чтобы сложить стол, расположите его на ровной поверхности боковой стороной вниз. Складывайте стол медленно, пока он не слезится на 90 градусов. Затем сложите деревянные части.
3. Убедитесь, чтобы эластичные веревки не попали в места соединения алюминиевых частей.

Установка подушки для лица:

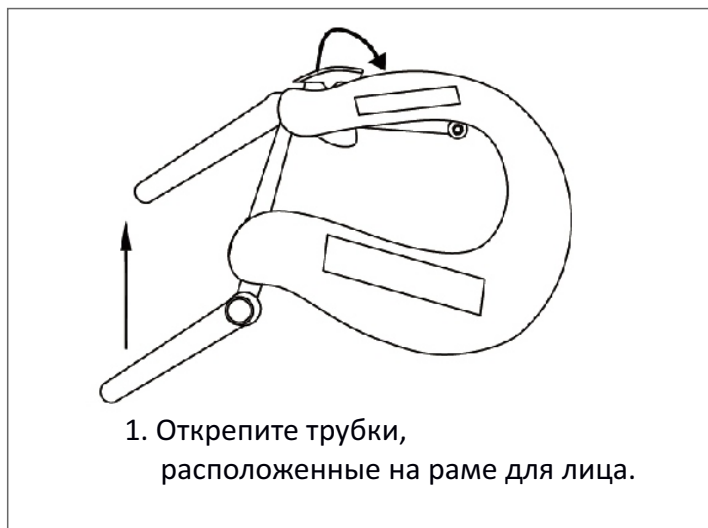

RELAX DELUX






Установка подушки для лица:



Регулировка высоты:

Поверните 2 барашка против часовой стрелки на деревянной стойке таким образом, чтобы стойка опустилась вниз. Поднимите стойку и установите на нужную для вас высоту. Выставьте ноги по высоте и закрутите барашком по часовой стрелке.

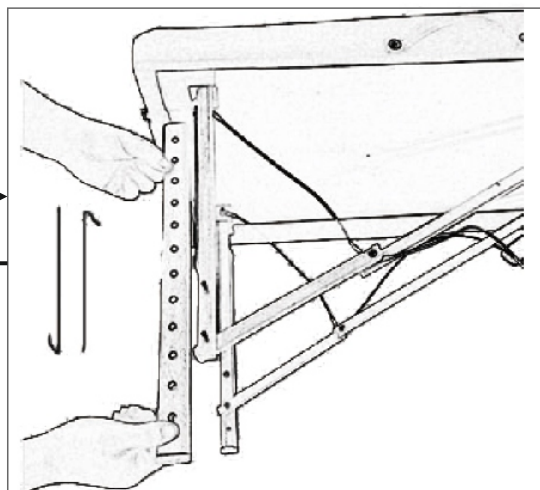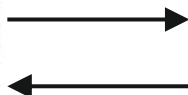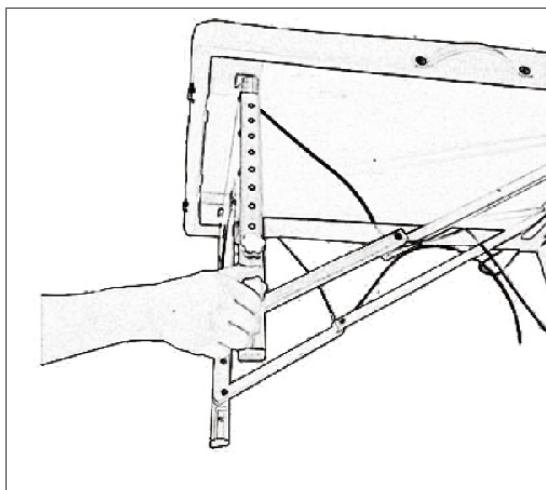

Уход:

1. Используйте массажный стол по назначению.
2. Очищайте стол от пыли и грязи теплой мыльной водой, а затем протрите его сухой тряпкой.
3. Не используйте для очистки грубые химические средства.
4. При длительном неиспользовании стола, сложите его и уберите в сухое/прохладное место. Для этого расположите основание подголовника и подушку для лица в специальное место под стол и закрепите эластичными веревками.

Обслуживание:

В случае поломки некоторых деталей, обратитесь к продавцу для их замены или починки.